

屋外での作業、レジャーに! 応急用毒吸取り器

ポイズンリムーバー

DOKUTORINA



ハチ



ヤブ蚊

ドクトリーナ



毒虫



蝎



Poison Remover **DOKUTORINA V**
— ポイズンリムーバー ドクトリーナV —

Poison Remover **DOKUTORINA Lock**
— ポイズンリムーバー ドクトリーナLock —




屋外での作業、レジャーに! 応急用毒吸取り器
Poison Remover
DOKUTORINA V
—— ポイズンリムーバー ドクトリーナV ——

5サイズのカップが付いた強力吸引タイプ

- スズメバチ、蚊、ブヨ等の毒虫や毒ヘビによる傷口の応急処置ツール。
- 皮膚下にとどまっている、虫刺されなどによる、毒液を吸引し、取り除きます。その結果、かゆみ、痛み、腫れ等の深い症状を軽減します。
- 一般的なかゆみ止めクリームや軟膏が、清涼感などで深い症状をまぎらわせるのとは異なり、根本的な症状の原因である毒液を取り除く事ができます。
- 5つ(6種)のカップ付。カップは洗い消毒して繰り返し使えます。

吸引方法

- ①シリンダーの先端にカップをセットする。
- ②ピストンレバーを引き、カップの面を傷口にあてる。
- ③親指でレバー頭部を押し下げ、レバーを最後まで押す。

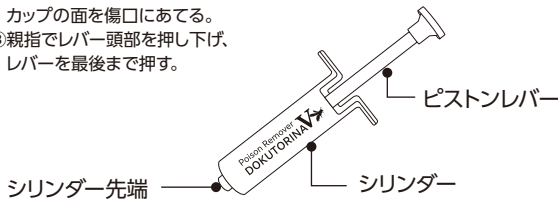

ポイズンリムーバー
ドクトリーナV

商品コード	価格
916-837	¥2,000 (税込¥2,200)

【サイズ】 本体：W5.8×D2.7×H12cm
【材質】 本体：ABS、カップ：PP

- シリンダー×1
- カップ×5種類 (φ22mm、φ19mm、φ15mm、φ10mm/φ4mm、楕円型17×9mm)
- 収納袋
- ※φ10mmのカップは両面が使用できます

手を離しても吸引状態をキープできる!

国際特許のロック機能付

Poison Remover
DOKUTORINA Lock

—— ポイズンリムーバー ドクトリーナLock ——

国際特許取得済ロック機構付き


国際特許NO.
DM/204126

- スズメバチ、蚊、ブヨ等の毒虫や毒ヘビによる傷口の応急処置ツール。
- コンパクトサイズの本体と透明カップ 2個がセットになっています。



小口径は子どもの手や、大人の指向きです

吸引方法

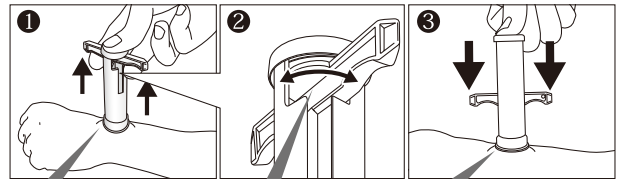

20~30秒そのまま

ロックする

患部に当てたまま

ピストン・ハンドルを引き上げて、ロックします。
※①~③を繰り返してください。

ロックを外せば、ハンドルは下がります。



ポイズンリムーバー
ドクトリーナLock

商品コード	価格
916-838	¥1,200 (税込¥1,320)

【サイズ】 本体：W6.5×D2.7×H9.5cm
【材質】 本体：PP、カップ：PC

- シリンダー×1
- カップ×2種類 (φ21.5mm、φ6mm)
- 収納袋

重要注意

1. きつく止血しようとししないでください。組織が壊死するなどして、危険です。
2. 吸引中に無理に外さないでください。毒液が飛び散ると危険です。
3. 毒蛇にかまれた場合は、吸引をより多く行ってください。
4. 使用後はカップのみ洗い、消毒をしてください。シリンダー(本体)内が濡れると十分な吸引ができなくなりますので、シリンダーは洗わないでください。
5. 携行する前に必ず吸引テストをして、破損等がないかを確認してください。
6. 本製品はあくまでも応急処置用ですので、処置後に必ず医師の診断を受けてください。

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なる場合がございます。
- 商品のサイズ、質量などは全て(約)の値です。
- このカタログは、2026年6月現在のものです。 [10677]

sanwa

株式会社 三和製作所

〒132-0021 東京都江戸川区中央 4-11-8
tel.03-5607-7811(代) fax.03-5607-7812
https://www.sanwa303.co.jp



皆様をサポートするお近くの代理店