

Audiometer

オーディオメータ JISタイプ4

シンプル操作でスムーズに検診

point

1

検診用に最適化された
ヘッドホン



イヤー部の左右の判別も、
文字と色で
分かりやすく標示。

point

2

検診用の周波数や
レベルにワンタッチ切替



使いやすく、分かりやすい
操作パネルデザインで、
集団検診もスムーズに。

point

3

初回点検校正の
無料サービス付き



学校保健安全法施行規則では
「オーディオメータの定期校正」が
推奨されています。



1人用



2人用



5人用

TYPE4

1人用・2人用・5人用の
3ラインナップ

- 多人数での集団健診もスピーディーな対応で、目的に合わせ3タイプからお選びいただけます。
- 「学校検診」「一般検診」の2モードで、簡単に切り替えが可能です。

皆様をサポートするお近くの代理店

■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なる場合がございます。
■商品のサイズ、質量などは全て(約)の値です。
■このカタログは、2024年10月現在のものです。 [10608]

 sanwa

株式会社 三和製作所

〒132-0021 東京都江戸川区中央 4-11-8
tel.03-5607-7811(代) fax.03-5607-7812
<https://www.sanwa303.co.jp>

SQUIL

見逃さないで 子どもたちの 難聴を



学校保健安全法施行規則では定期的な校正が推奨されています。


オーディオメータ校正



正確な聴覚検査のために、医療機器修理業取得の
保健室専門メーカーである当社にお任せください。

JIS規格に則った全メーカー対応の校正を
適正価格でご提供いたします。

オーディオメータ校正の手順(例)

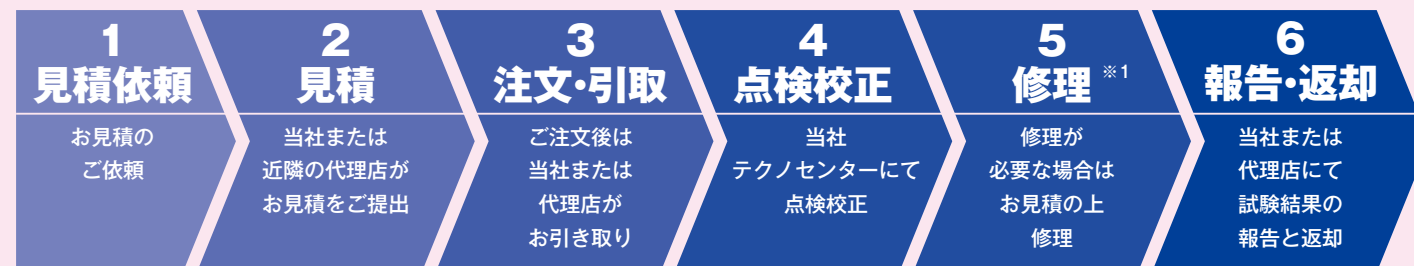


※1 他メーカーのオーディオメータの校正において、修理が必要と判断された場合は、部品などの関係上、弊社での修理はお受けできません。その際は、製造メーカーまでお問い合わせをお願いいたします。

お見積依頼をお待ちしております。

依頼書ダウンロードはこちら▶



 sanwa 株式会社 三和製作所 〒132-0021 東京都江戸川区中央 4-11-8 tel.03-5607-7811(代) fax.03-5607-7812 <https://www.sanwa303.co.jp>

■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なる場合がございます。■商品のサイズ、質量などは全て(約)の値です。■このカタログは、2024年10月現在のものです。 [10608]



正しい検査、子どもたちの健やかな成長のために 年1回の点検校正を推奨しています。

難聴の有無を選別するためにオーディオメータを使用し、スクリーニング(簡易検査)を行います。
健診で使用するオーディオメータは精密電子機器であり、医療機器です。そのため、オーディオメータのヘッドホンから発する音が、指定された周波数に適合するか、また、その音の大きさが適切であるかを1年に1回、点検校正していただくことを推奨しています。

だから、選ばれています！ サンワのオーディオメータ校正！

✓すべてのオーディオメータに対応します。

1人用、2人用、5人用はもちろん、サンワの自社オーディオメータだけでなく、全メーカー・全機種・JIS規格に則った校正が可能です。

※他社メーカーの点検校正後に要修理と判断された場合は、部品などの関係上、弊社での修理はお受けできません。その際は、直接製造メーカーへのお問い合わせをお願いいたします。

✓予算に応じて価格ご相談預かります。

まとめてお受けする台数や、ご依頼の時期によりご予算に応じて価格のご相談を預かります。適正価格でご提供いたしますので、お気軽にお見積り依頼ください。

※料金はヘッドホンの数により異なります。通常ご依頼の集中する1~3月を避け、比較的空いている夏場などにご依頼いただくことをお勧めします。

✓新規買い替えのサポートを行います。

オーディオメータの点検校正の際、JIS規格不適合の旧規格の商品が見受けられることがあります。旧規格品の使用は正確な検診の妨げとなり、難聴を見逃すリスクにつながります。サンワではJIS規格適合品への買い替えサポートも行っています。是非ご相談ください。

✓医療機器修理業取得の保健室専門メーカーのサンワが行います。

政令指定都市等、日本中で積み重ねた信頼と実績がございます。



当社テクノセンターの設備で専門スタッフが行う安心の自社校正！



当社テクノセンター無音室



専門スタッフによる丁寧な校正

試験成績表	
品名	オーディオメータ1人用
規格	JIS S
製造番号	100000
検定日	2015.3.27
検定者	000000
検定機	000000
検定場所	000000
検定温度	22℃
検定湿度	65%
検定周波数	1000Hz
検定音量	30dB
検定結果	合格

試験成績表を添付



学校での オーディオメータ検診の方法

- 1 選別聴力検査は聞こえの良い耳から始めるが、どちらがよく聞こえるかわからないときは、右耳から始める。
- 2 ヘッドホンを被検査者の耳に密着させる。
- 3 まず1000Hz30dBの音を聞かせ、聞こえるかどうか反応させる。応答が不明瞭ときには断続音を用いて音を切ったり、出したりして応答を求める。明確な応答が得られたら4000Hz25dBの音を聞かせ応答を確かめる。応答は応答ボタンを押すか手を挙げるなどの合図で行わせる。

一般検診の場合
4000Hz40dBの検査音を用います。

カンタン操作手順

- ①ヘッドホンの「右」を押します。
- ②簡易設定の「1000Hz」を押します。
- ③「検査音」ボタンを押し、
- ④「応答信号」のランプを確認。
- ⑤「4000Hz」を押し、③を確認して押します。
- ⑥「左」を押し、①~⑤の手順に従って検査します。



管理医療機器			JQA検定品			管理医療機器		
サンワオーディオメータ MT			サンワオーディオメータ MTJ					
規格	商品コード	価格	規格	商品コード	価格			
①1人用	913-307	¥103,000 (税込 ¥113,300)	④1人用	913-310	¥123,000 (税込 ¥135,300)			
②2人用	913-308	¥128,000 (税込 ¥140,800)	⑤2人用	913-311	¥153,000 (税込 ¥168,300)			
③5人用	913-309	¥198,000 (税込 ¥217,800)	⑥5人用	913-312	¥245,000 (税込 ¥269,500)			

■MT・MTJ共通
【サイズ】W27.7×D22.2×H10.1cm 【質量】本体:①②③⑤1.2kg ④⑥1.3kg、ヘッドホン(1つ):258g
【医療機器承認番号】1人用:222AGBZX00199000、2人用:222AGBZX00199A01、5人用:222AGBZX00199A02

■JANコード		■JANコード	
規格	商品コード	規格	商品コード
①1人用	4571263738888	④1人用	4571263738918
②2人用	4571263738895	⑤2人用	4571263738925
③5人用	4571263738901	⑥5人用	4571263738932

JQA検定品

JQA検定品は、財団法人日本品質保証機構(JQA)による検査合格品です。有効期限は1年です。

学校検診		適合規格	
選別周波数	1000Hz 4000Hz	JIS	T1201-1(2020)
聴力レベル	30dB 25dB	タイプ別表示	タイプ4
		周波数	250、500、1000、2000、3000、4000、6000Hz
		周波数精度	±2%以内
		聴力レベル	-10~70dB、5dB間隔
		出力音圧精度	±3dB(250~4000Hz)、±5dB(6000Hz)
		電源	AC100V 50/60Hz

一般検診		定期検査	
選別周波数	1000Hz 4000Hz		
聴力レベル	30dB 25dB		

■専用ケース 1人用~5人用まで全ての機種に対応した専用収納ケース

本体にヘッドホン、手元スイッチなどを接続したまま収納できます。



検診の際の目かくしとしてもご利用いただけます。

オーディオメータ専用ケース
商品コード: 913-313
価格: ¥15,000 (税込 ¥16,500)
【サイズ】幅31×奥行25×高25cm【重量】765g
【材質】ナイロン、ポリプロピレン