


クリマスク CLI mask

● 飛沫を防いで感染予防 ●



飛沫防止

自分の飛沫も
しっかり防げる！

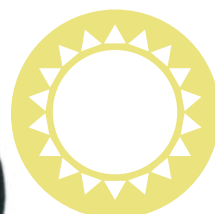

熱中症対策

熱がこもらず
暑い日も快適！



エコでリーズナブル

水洗いOK
繰り返し使用可能！

こんなシーンに



コミュニケーション
がスムーズに!



口元を見せたいレッスンに

お子様も
装着OK



聴覚障害のある方
手話通話者も安心


商品説明

水洗いでお手入れください。



- コーティングはお手入れや使用頻度とともに効果が消えます。
- アルコールなどの溶剤では拭かないでください。
- コーティングが消えた場合は、市販のメガネ用曇り止めシートをお使いください。
- シールドはやわらかい材質のため、お取り扱いにはご注意ください。

シールドの両面はくもり止めコーティングされています。

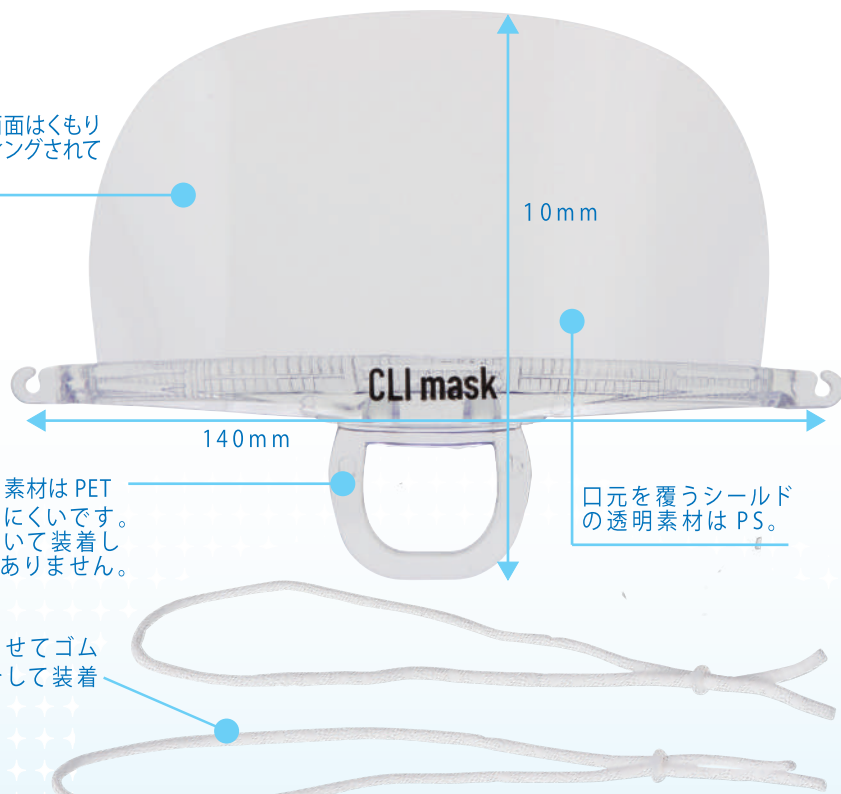


顎ラインの素材はPETで硬く割れにくいです。加工されていて装着してもいたくありません。

口元を覆うシールドの透明素材はPS。

お顔に合わせてゴム紐の調整をして装着できます。


使用手順

①ゴム紐の調整

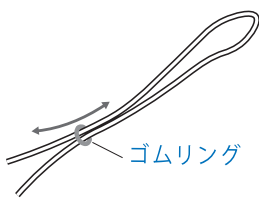


顔のサイズに合わせて、ゴムリングの位置を調整します。

②ゴム紐の取り付け

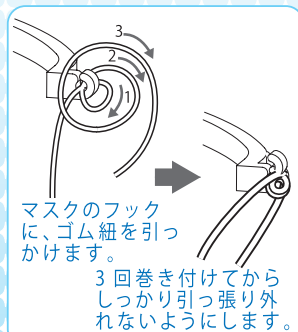

マスクのフックに、ゴム紐を引っかけます。
3回巻き付けてからしっかり引っ張り外れないようにします。

③マスク保護フィルムの剥離

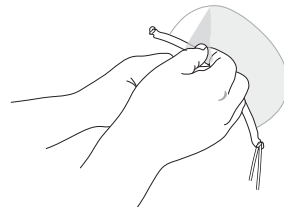

マスクの内側の薄い保護フィルムを剥がします。

CLI mask

クリマスク

単品	905-041	¥180 (税抜)
20枚組	905-042	¥2,980 (税抜)

【セット内容】クリマスク本体、ゴムリング付ゴム紐(2本)
【質量】約11g【材質】PET、PS、ゴム
【サイズ】ゴム紐:全長約280mm
マスク部分:約幅140×高さ100mm
(シールド部分高さ60mm)

■製品は改良のため、予告無く変更する場合がありますので、ご了承ください。
■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なる場合がございます。
■このカタログは、2020年8月現在のものです。

sanwa

株式会社 三和製作所

〒132-0021 東京都江戸川区中央 4-11-8
tel.03-5607-7811(代) fax.03-5607-7812
<https://www.sanwa303.co.jp>

安心をサポートするお近くの代理店