

健康診断を効率化！モニターリモコンで検査する

電子視力計ドルフィン
Dolphin

測定距離
5m

最新版の「児童生徒等の
健康診断マニュアル」に
則しています

ディスプレイ
サイズ
11.5×8.6cm

モニター裏のフック穴で壁にかけて
使用することもできます。

かんたん自動測定で一人あたり約15秒のスピード健診！

Point 1

学校保健安全法に基づく 3.7.0式視力測定を自動化

0.3、0.7、1.0の3視標を用いた視力検査にて、表示(指示)と測定を自動化。また、自動的に視標を選択して表示する『自動測定モード』と手で任意の視標を選択して表示する『手動モード』の2種類の検査方法が可能です。

Point 2

片手で持てる軽さ！ かんたん操作の高機能リモコン

回答に合わせてボタンを押すだけで検査の進行状況と結果がリモコンに表示されるので、健診結果を記入しながらの片手操作も可能です。また、リモコン周囲4カ所のダイオードで広い角度から操作できます。


Point 3

高解像度モニタ採用！ 正確に視力検査ができます


5.5インチ液晶画面の中心にランドルト環を表示。アナログ測定と同様のくっきり表示で検査できます。また、自動測定では視標の向きを覚えられないようにランダムで表示されるので、正確に視力が測定できます。

自動健診の流れ

- 1 開始ボタンを押して、自動健診をスタート
- 2 モニタ上に視標が表示され、被検者が回答
(戻る矢印で複数回発生)
- 3 回答に合わせて、測定者がリモコンで入力
- 4 回答結果にあわせて判定が表示されます

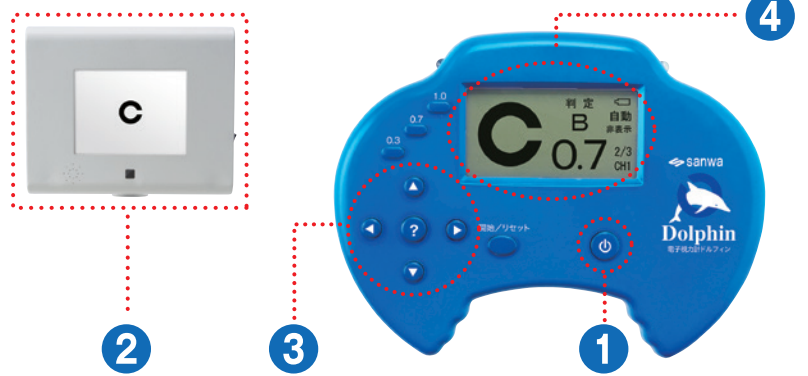

液晶の表示

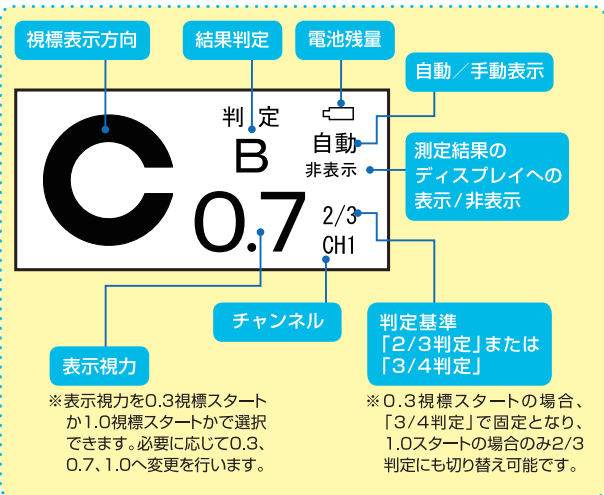

電子視力計ドルフィン 一般医療機器

①本体のみ	101-840	¥104,500 (税込)
②架台セット	101-841	¥115,500 (税込)

【サイズ】本体22×18.9×4.5cm
【質量】①1.7kg②4.8kg(リモコン、ケーブル含む)【測定距離】5m
【付属品】リモコン、ACアダプター、単3アルカリ乾電池2本(リモコン用)
【医療機器届出番号】13B2X10109000007

■JANコード

規格	JANコード
①101-840	4571263733876
②101-841	4571263733883

専用架台 93~163cm
組立時間 5分/1人

■製品は改良のため、予告無く変更する場合がありますので、ご了承ください。
■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なる場合がございます。
■このカタログは、2022年6月現在のものです。

sanwa

株式会社三和製作所

〒132-0021 東京都江戸川区中央 4-11-8
TEL : 03-5607-7811 FAX : 03-5607-7812
<http://www.sanwa303.co.jp>

健康をサポートするお近くの代理店